

Cómo mezclar el factor VIII (Advate®) en casa

Existen tres simples pasos para mezclar el medicamento de factor VIII (Advate®) que es necesario inyectar para la hemofilia A:

- Presione: presione firmemente y el sistema se activará;
- Gire: hágalo girar suavemente para mezclarlo adecuadamente; y
- Voltee y retire: la dosis está lista para ser retirada del sistema.


A continuación, se presentan los pasos detallados que debe realizar para garantizar que el factor se mezcle de manera segura y esté listo para su administración por vía intravenosa (IV). Este *¿Sabía usted...?* analizará el dispositivo Baxject III® que se utiliza para conectar el vial de agua estéril (diluyente) con el vial del medicamento (Advate). Para ver un video del proceso, visite el sitio web de Baxter en www.advate.com/dosing/baxject-iii-system.html.

Mezcla del factor

Reúna todos sus suministros en una superficie limpia, lávese las manos y colóquese los guantes. Los guantes son opcionales para la infusión domiciliaria. Verifique la fecha de vencimiento y permita que Advate se entibie a temperatura ambiente.

Paso 1

Abra el paquete que contiene el dispositivo de mezcla Baxject III despegando la tapa. Coloque el vial en una superficie plana en posición vertical con la raya azul en lo alto. No lo utilice si parece turbio o si ve partículas en el agua estéril. Mantenga el vial en posición vertical. No lo recueste.

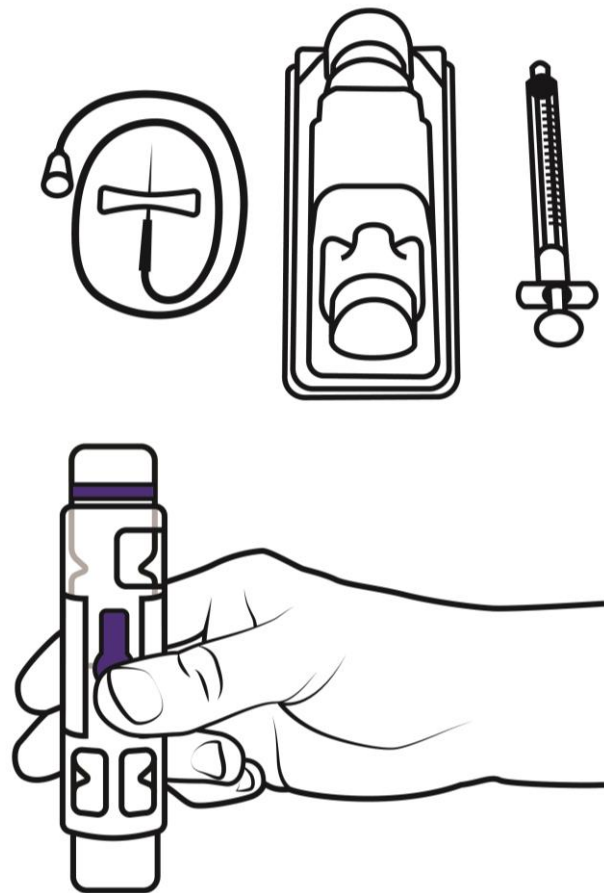


El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

Cómo mezclar el factor VIII (Advate®) en casa


Paso 2

- Sostenga el vial con una mano.
- Con la otra, presione firmemente la parte superior hacia abajo hasta el final, hasta que el agua estéril (diluyente) del vial superior fluya hacia el vial inferior (Advate).

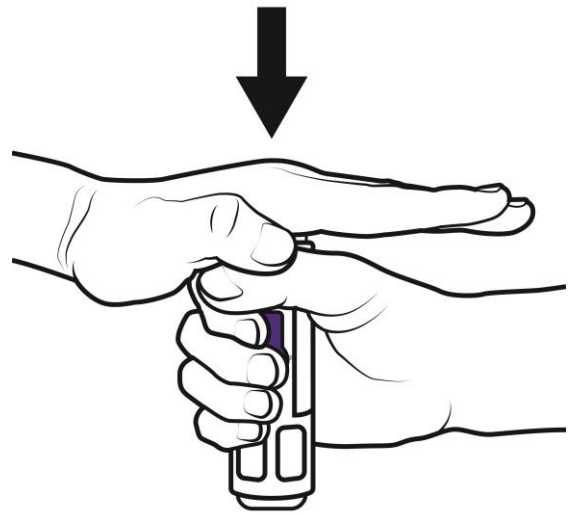

Paso 3

- Haga girar el vial suavemente con un movimiento circular hasta que Advate se disuelva.

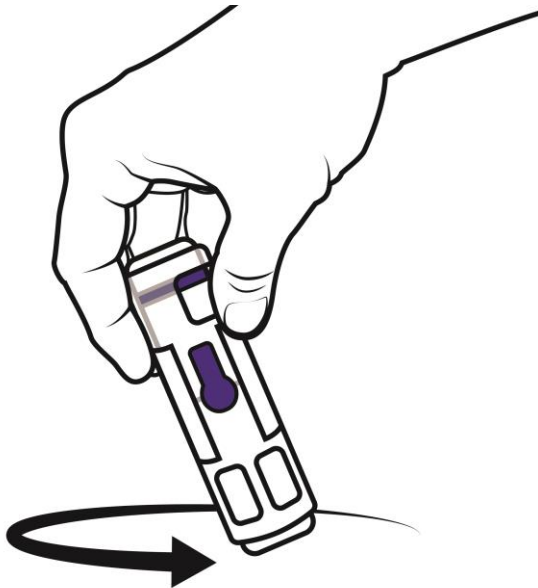


- No agite para mezclar. Si ve que hay polvo, continúe haciendo girar el vial. Esto hará que la solución se mezcle homogéneamente.
- La mezcla debería volverse cristalina. Si no está cristalina, deséchela y utilice otra dosis de factor. A continuación, llame a la Clínica de Hematología al 901-595-5041.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.


Cómo mezclar el factor VIII (Advate®) en casa

Paso 4

- Retire la tapa azul de uno de los lados del dispositivo.
- Retire la tapa de la jeringa (si corresponde).
- Conecte la jeringa al puerto lateral haciéndola girar hacia la derecha.
- No inyecte nada de aire.

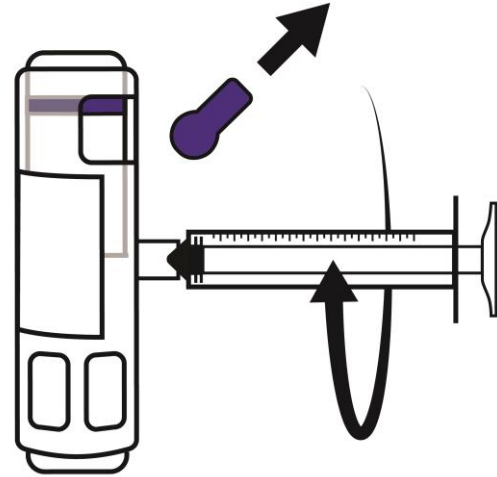


- Voltee los viales de modo que la **línea azul** del Baxject III quede ahora en la parte inferior.
- Retire lentamente el émbolo de la jeringa y permita que el medicamento llene la jeringa.
- Si la solución no fluye dentro de la jeringa, verifique ambos viales para asegurarse de que estén firmemente unidos.

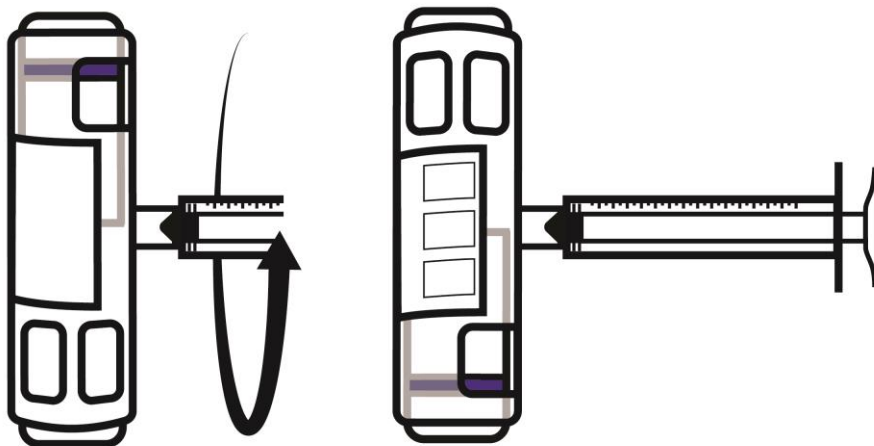

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

Cómo mezclar el factor VIII (Advate®) en casa

- Haga girar la jeringa para retirarla del puerto lateral. Asegúrese de no tocar el extremo de la jeringa.

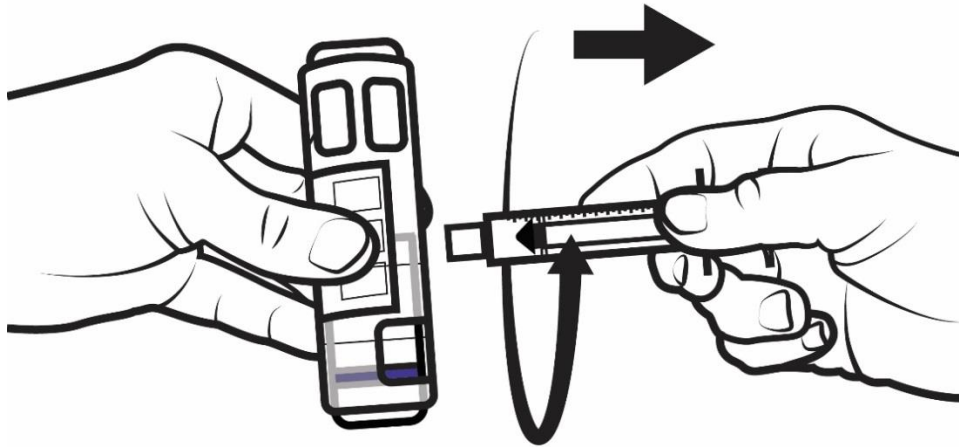

- No pasa nada si una pequeña cantidad de líquido queda en el vial.
- Elimine todo el aire de la jeringa antes de administrar el medicamento.
- Conecte el medicamento al juego de agujas antes de infundir.
- Para infundir el factor, consulte “¿Sabía usted...? Cómo suministrar el factor por vía intravenosa en casa”.
- Recuerde siempre colocar el adhesivo de la caja en su libro.

¿Preguntas?

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la administración del factor por vía intravenosa en casa o de la mezcla del factor con el dispositivo Baxject III, llame a la Clínica de Hematología al 901-595-5041. Si llama después de hora o durante los fines de semana, marque 901-595-3300 y pregunte por un coordinador de enfermería o un médico de guardia. Si está fuera del área de Memphis, llame a la línea gratuita 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833) y pulse 0 una vez conectada la llamada.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.