

## Cómo programar una bomba CADD® Solis para la infusión continua

Es posible que su hijo necesite líquidos o medicamentos de un dispositivo denominado bomba CADD Solis. Esta información le indica cómo programar la bomba en casa.


### Cómo programar la bomba CADD Solis de su hijo

Siga los pasos que se indican a continuación en orden. Si tiene preguntas, consulte a la enfermera de su hijo.

1. Encienda la bomba presionando el botón de encendido en el lado derecho de la bomba.
2. Presione el botón **Funciones** [Tasks].
3. Presione **seleccionar** [select] para “Restablecer el volumen del depósito”.



4. Presione **Sí** [Yes].

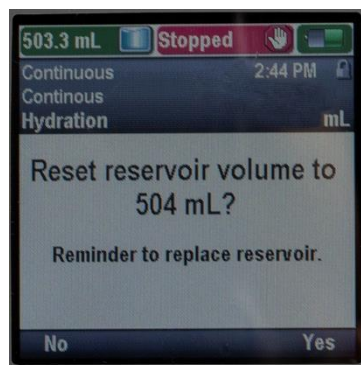

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

# ¿Sabe usted... continuación

## Cómo programar una bomba CADD® Solis para la infusión continua

5. Presione el botón con la flecha hacia abajo para “Ver la configuración de administración”.
6. Presione **seleccionar** [select].



7. Si necesita cambiar el “Flujo continuo”, presione **seleccionar**.



8. Para ingresar el código, presione **seleccionar**.
9. Utilizando los botones de flechas, vaya a \_\_\_\_ y presione **seleccionar**.
10. Utilizando los botones de flechas, vaya a \_\_\_\_ y presione **seleccionar**.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

# ¿Sabe usted... continuación

## Cómo programar una bomba CADD® Solis para la infusión continua

11. Ahora puede utilizar los botones de flechas para ir al flujo nuevo.
12. Presione **Guardar [Save]**.



13. Si necesita cambiar el “Volumen del depósito”, utilice el botón con la flecha hacia abajo para ir al “Volumen del depósito”.

14. Presione **seleccionar**.



15. Utilice los botones de flechas para ir al “Volumen del depósito” nuevo.
16. Presione **Guardar**.
17. Presione el botón **iniciar/detener [stop/start]**.


El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.



# ¿Sabe usted... continuación

## Cómo programar una bomba CADD® Solis para la infusión continua

18. Presione **Revisar** [Review].
19. Presione **Aceptar valor** [Accept Value] para aceptar la “Velocidad continua”.
20. Presione **Aceptar valor** para aceptar el “Flujo para mantener vena abierta” (Keep vein open, KVO) de 0.
21. Presione **Aceptar valor** para aceptar el “Volumen del depósito”.
22. Presione **Siguiente** [Next].

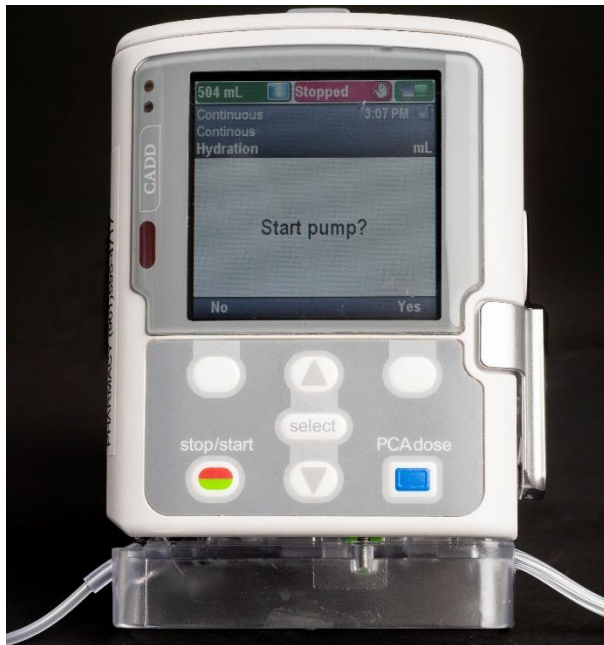

23. Presione **Sí** [Yes] para iniciar la bomba.

### ¿Preguntas?

Si tiene preguntas acerca de cómo programar la bomba CADD Solis, llame a la enfermera de infusión en el hogar de su hijo. Si está utilizando el servicio de infusión en el hogar de St. Jude, llame al 901-595-7464. Si se encuentra fuera del área de Memphis, puede marcar la línea gratuita 855-466-3799.

*St. Jude Children's Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.*

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك الاستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك مجاناً. يرجى الاتصال بالرقم 1-866-278-5833 (الهاتف النصي: 1-901-595-1040).

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.